



KULZER

MITSUI CHEMICALS GROUP

کامپوزیت های ترنسلوسنت دایموند:



I. (Clear Light) CL : کامپوزیت کاملاً ترنسلوسنت و شیشه ای

II. (CLEAR OPAL) CO : کامپوزیت ترنسلوسنت و صدفی

ترکیب شیمیایی کامپوزیت کاریزما دایموند :

ماتریکس TCD با فیلر های نانو هیبرید که باعث بهبود زیبایی، دوام و هدلینگ و کاهش چشمگیر شیرینکیج می شود .

بررسی فشار شیرینکیج :

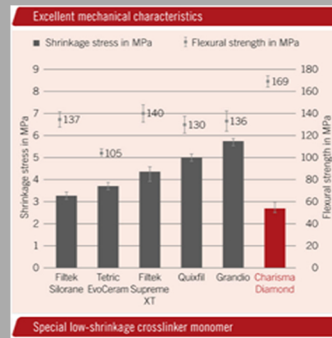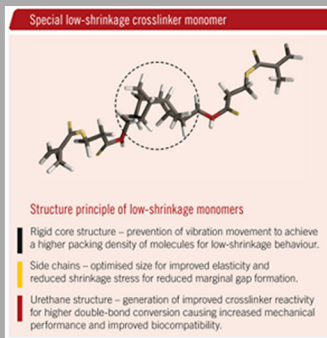

رنگ دندانهای طبیعی در نواحی مختلف حالت سایه و روشن دارد و یکسان نیست برای مثال در لبه ها شفاف تر می باشد، از این رو برای بازسازی طبیعی تر جزییات دندان، از کامپوزیت هایی با رنگ و ترنسلوسنسی متفاوت به صورت لایه ای استفاده می شود.

کاربرد کامپوزیت ترنسلوسنت برای نواحی اینسایزال می باشد و در برخی از تکنیک های لیرینگ برای پالاتال شلف و لینگوال شلف هم استفاده می گردد.

همچنین در کیس های ونیر کامپوزیت نیز می توان از این شید ها به منظور شفاف تر کردن سطح کامپوزیت به عنوان یک لایه مکمل و بسیار نازک استفاده نمود.